
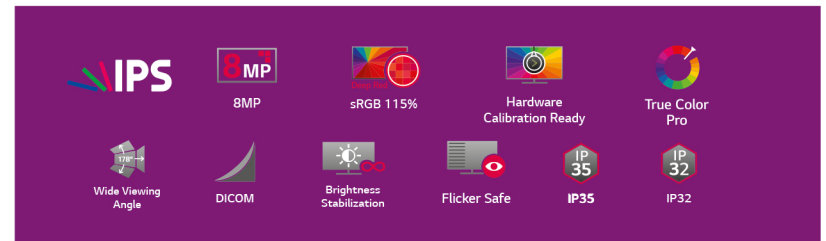


Monitor Cirúrgico LG 27" Full HD

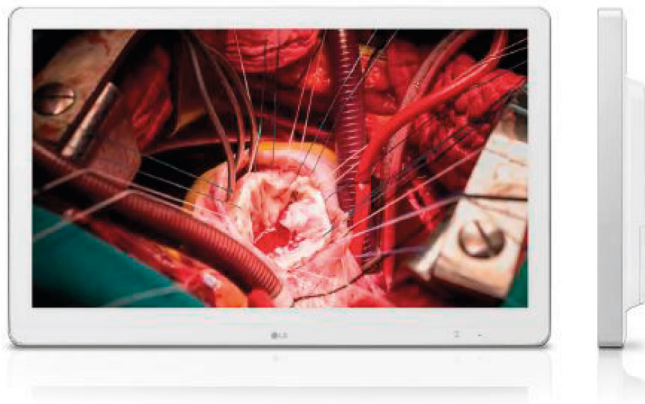


27HK510S

Imagens em Alta Resolução para Cirurgias

Tela IPS 8MP* com sRGB 115% (Deep Red)

O monitor cirúrgico LG 27" 8MP com Painel IPS oferece uma qualidade de imagem em alta resolução, amplo ângulo de visão de 178°, sRGB 115% com maior escala de vermelho e imagens sem perda de cores.

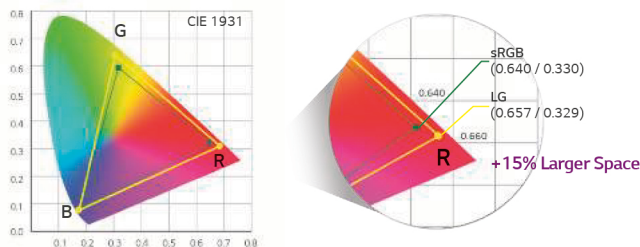

*4K: 3840x2160

DICOM[®] Part 14 & Estabilização de Brilho

Visando garantir o sombreamento mais preciso e consistente das imagens, o monitor cirúrgico da LG cumpre estritamente o padrão DICOM Part 14 (padrão internacional relacionado à expressão de imagens em escala de cinza), entregando imagens precisas e consistentes. O monitor também conta com estabilidade de brilho, permitindo a adaptação do monitor durante o procedimento cirúrgico para as condições de iluminação local.




*DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (Comunicação de Imagens Digitais em Medicina).

Ideal para o Ambiente Cirúrgico


IP35 & IP32: Resistente à Água e Poeira

O monitor cirúrgico da LG tem certificações IP35 para o painel e IP32 para a traseira, que garante a proteção contra diferentes substâncias como sangue e fluidos corporais. Dessa forma, o Monitor Cirúrgico da LG tem maior durabilidade e resistência em ocorrências inesperadas.

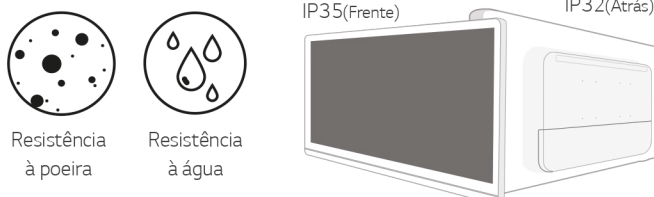

Tela Anti-Reflexiva


A tela anti-reflexiva do monitor cirúrgico da LG reduz o reflexo de luz entre o vidro e o painel LCD para melhorar a precisão da imagem. Com essa tecnologia, é possível ter imagens mais brilhantes e nítidas para garantir maior qualidade de cores e brilho.

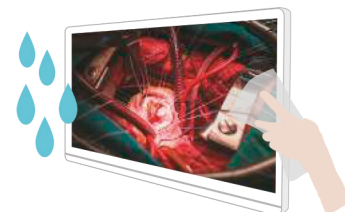

Conforto de Visão


Flicker Safe

O recurso Flicker Safe minimiza o cansaço dos olhos ao reduzir tremulações de luz da tela. A combinação desse recurso com a qualidade do Painel IPS permite que qualquer usuário trabalhe confortavelmente ao longo do dia.

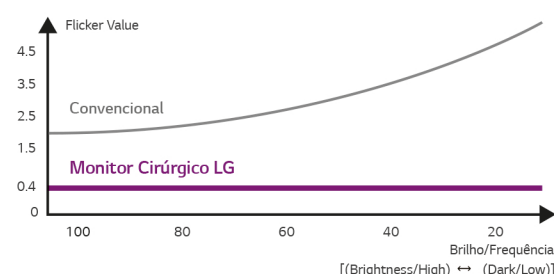

*Resultados baseados em testes feitos no Laboratório LGE.

Especificações

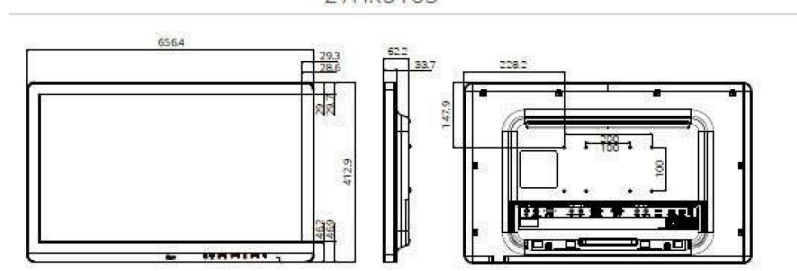Modelo		27HK510S
Dimensões Externas		
Tela	Tipo	IPS
	Tamanho	27" (16:9)
	Resolução Máxima	1920 x 1080
	Pixel Pitch	0.3144 mm x 0.3114 mm
	Número de Cores	10bit / sRGB 115% (Deep Red)
	Ângulo de Visão	178/178
	Brilho	1000cd/m ² (Typ.)
	Tratamento de Tela	Protection Glass
	Contraste Estático	1000:1 (Typ.)
	Tempo de Resposta	14ms (Typ.)
Entradas	Conexões de Entrada	HDMI (1.4) x 1, S-Video x 1, Composite x 1, 3G-SDI x 1, DVI-I x 1 (Compatible with D-sub & Component via adapter)
	Frequência (H/V)	3G-SDI x 1, DVI-D x 1
Consumo de Energia		HDMI, DVI-D: 30~83kHz / 56~61Hz, D-sub: 30~83kHz / 56~61Hz
Estabilização de Brilho		
Resistência		Sim
Certificações		IP35 / IP32 (Front / Back), 8H Glass, IK06
Peso (sem base)		ANVISA, IEC (IEC60601-1 / IEC60601-1-2), FCC (FCC part 15 Class A), CB, UL (UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI e CE MDD (Class 1)
		7,7kg

*A base não está inclusa no monitor cirúrgico.



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

Copyright © 2020 LG Electronics. Todos os Direitos Reservados.

+55 (11) 2387-4760

www.futuremed.com.br

contato@futuremed.com.br

[@futuremedbrasil](https://www.instagram.com/futuremedbrasil)