

TOPAZ

Sistema de raio-x digital móvel

DRGEM

Your Best Healthcare



AMPLA COBERTURA E MELHOR FLUXO DE TRABALHO.

Tudo começa com Tecnologia Avançada

Integrando alta tecnologia e mais de uma década de experiência em sistemas de radiografia convencional e digital, o TOPAZ da DRGEM é um sistema de radiografia digital móvel de última geração, projetado com o máximo conforto para pacientes e usuários. De seu software amigável a movimentos suaves, o TOPAZ é feito para melhorar seu fluxo de trabalho e fornecer imagens de alta qualidade.

Opções:


- Medidor DAP
(Produto de área de dosagem)
- Grade e suporte de alta resolução facilmente destacáveis

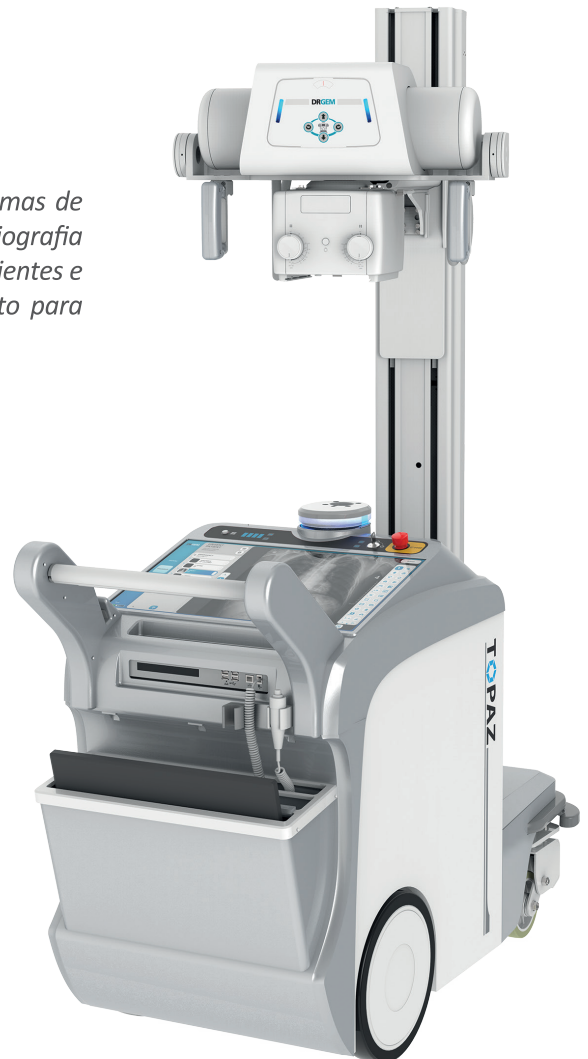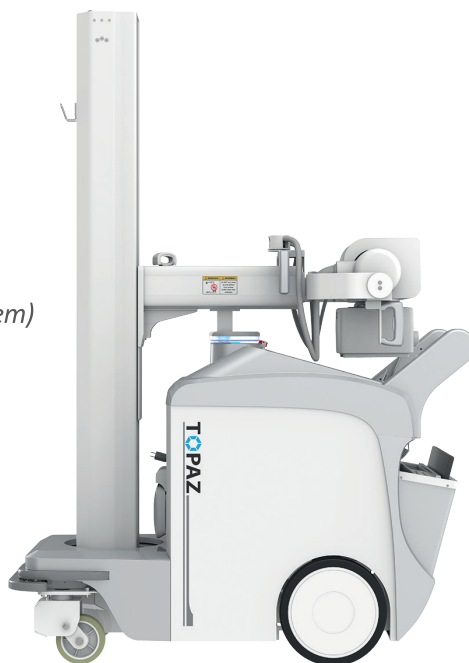

Software de imagem completo e excelente processamento de imagem digital

Com uma tela sensível ao toque integrada de alto desempenho, o TOPAZ oferece uma interface amigável e um software poderoso para facilitar a operação e aumentar o fluxo de trabalho. O processamento de imagem digital baseado em visualização anatômica otimiza e aprimora automaticamente a qualidade da imagem, com armazenamento automático de imagem e impressão com capacidade de rede DICOM 3.0, aumentando a produtividade do exame e diminuindo o seu tempo.

- Fornece interface de usuário conveniente e fácil operação
- Processamento de imagem digital baseado em visão anatômica
- Suporte radiográfico e função de controle automático do colimador
- Os recursos da interface de rede DICOM 3.0 incluem: lista de trabalho, impressão, armazenamento e consulta para integração com qualquer PACS ou RIS.

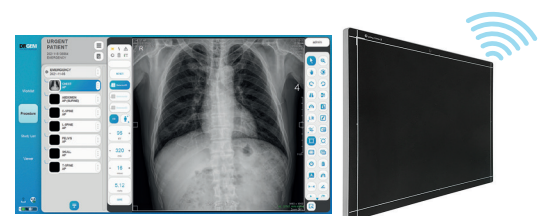

Cobertura mais ampla

Curso de braço mais longo e coluna alta fornecem cobertura mais ampla e serviço de operação amigável ao paciente

Função de segurança

Para-choque e freio de segurança frontal, roda dianteira com mola e indicador LED de status fornecem segurança e conveniência para o paciente e o operador. Isso evitará qualquer acidente inesperado / secundário.

Posicionamento e movimento precisos

Posicionamento e movimentos precisos fornecidos com 4 botões de direção neste painel de controle



Qualidade de imagem otimizada

Excelente qualidade de imagem por processamento de imagem digital otimizado.

Design ergonômico e compacto

Fácil condução e capacidade de manobra com design ergonômico e compacto.

Compartimento de armazenamento conveniente

Espaço suficiente para detector, bateria e outros equipamentos necessários.

Mobilidade Rápida

A velocidade de 5 km/h permite economizar tempo e custo, satisfazendo seus pacientes com processamento rápido.

Controle remoto

Controle fácil e conveniente da exposição de raios-X e lâmpada do colimador.



2 ANOS DE GARANTIA

Modelo	TOPAZ -32D	TOPAZ -40D
Classificação de saída	32 kW	40 kW
Alcance KV	40-125kV / 150kV	40-125kV / 150kV
Faixa mA	10 a 400 mA	10 a 500 mA
Faixa de mAs	0,1 s 500 mAs	0,1 s 500 mAs



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760