



GXR-ES

DRGEM
Your Best Healthcare



*Adequado para o seu fluxo de trabalho,
espaço e orçamento*

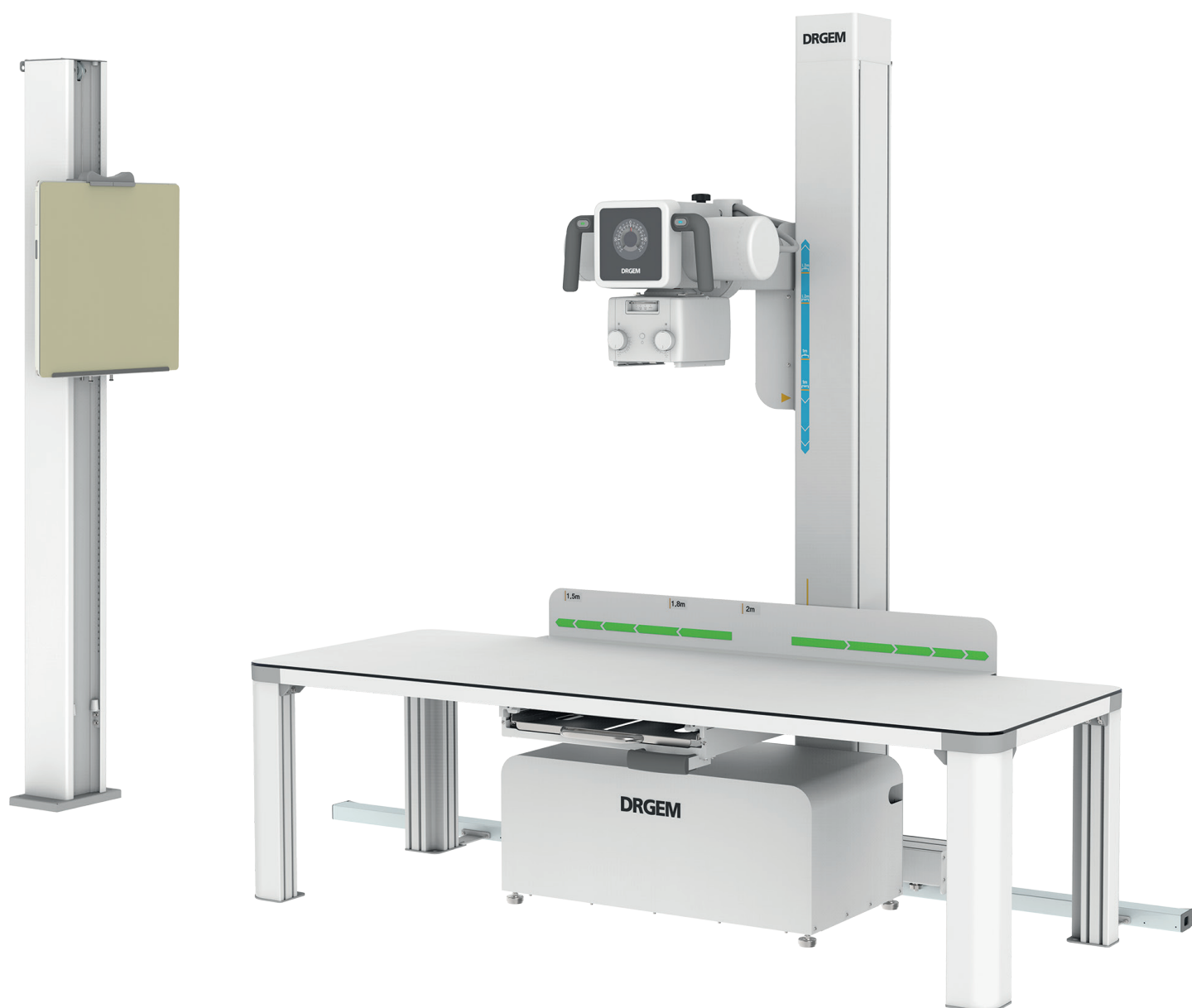

Diferentes posicionamentos do paciente:

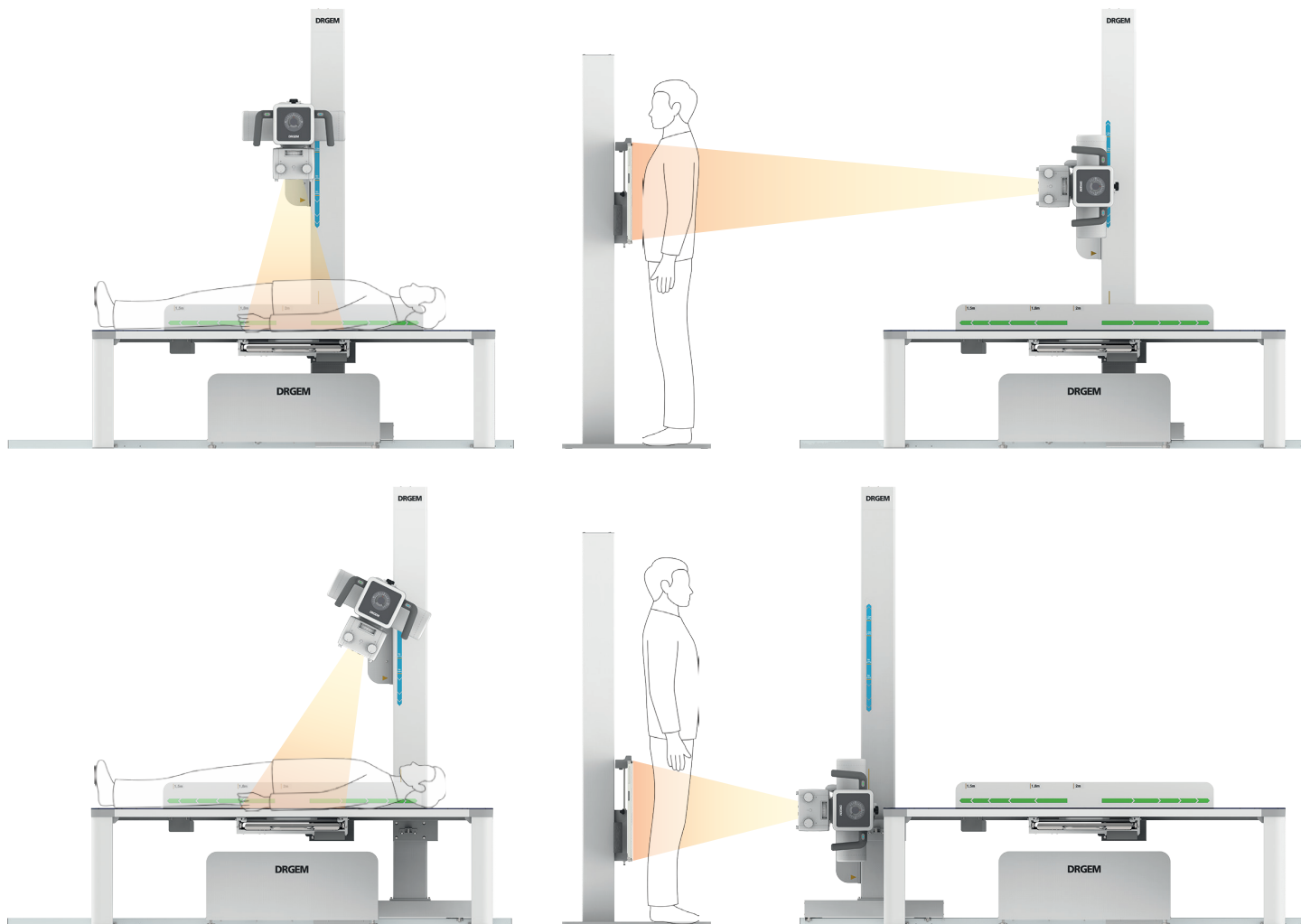


Ampla cobertura para um excelente diagnóstico ortopédico: O movimento transversal do tubo fornece ampla área de posicionamento.

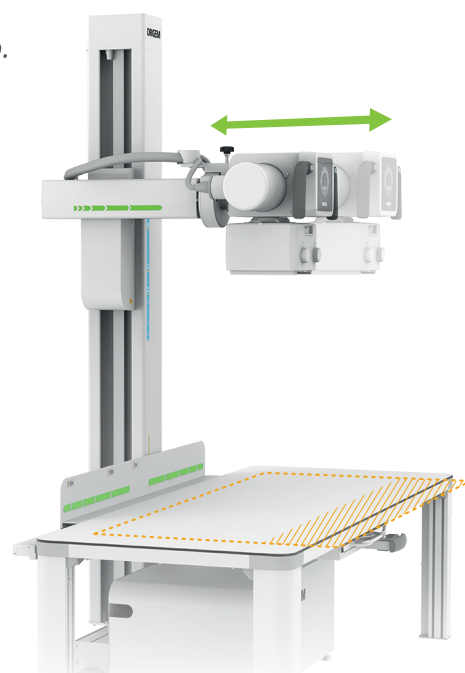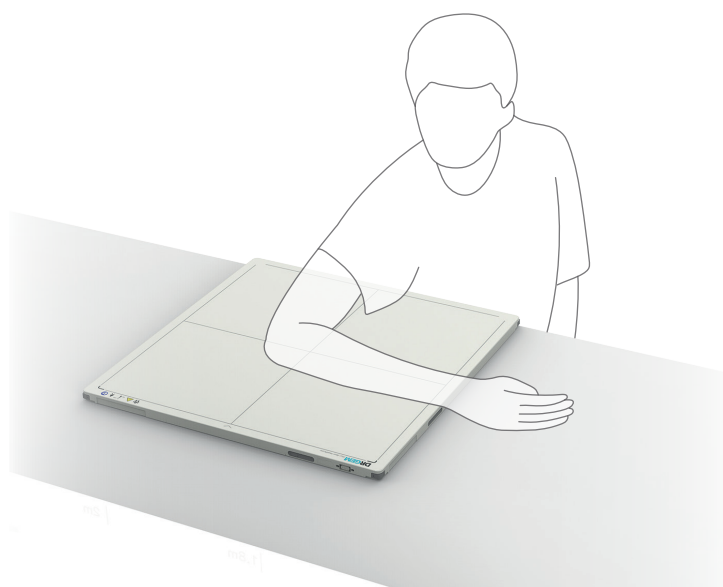

Rastreamento automático de Bucky:

- O Bucky da mesa está sempre centralizado no tubo de raio-x através da ligação com o trilho.
- O rastreamento do Bucky pode ser facilmente ativado ou liberado por operações simples, efetuando dessa forma o exame oblíquo.


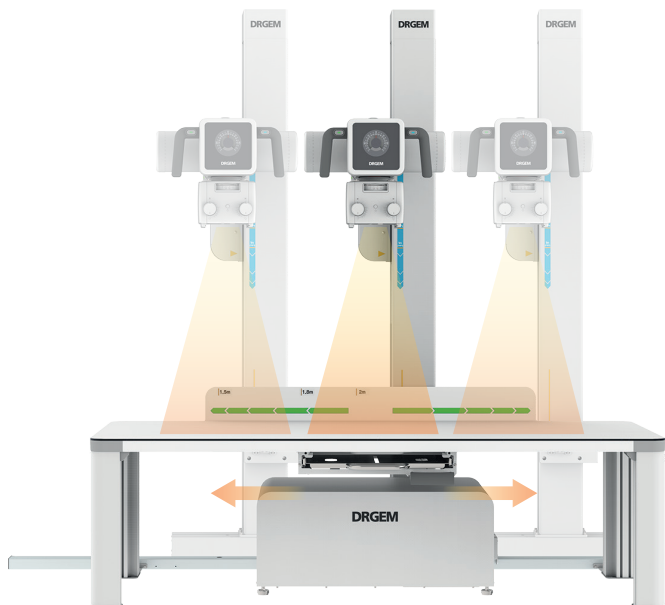


Bucky mural com contrapeso:

- Com um contrabalanço de peso e uma alça robusta, o Bucky mural torna o posicionamento vertical leve e fácil.



Grade Removível:

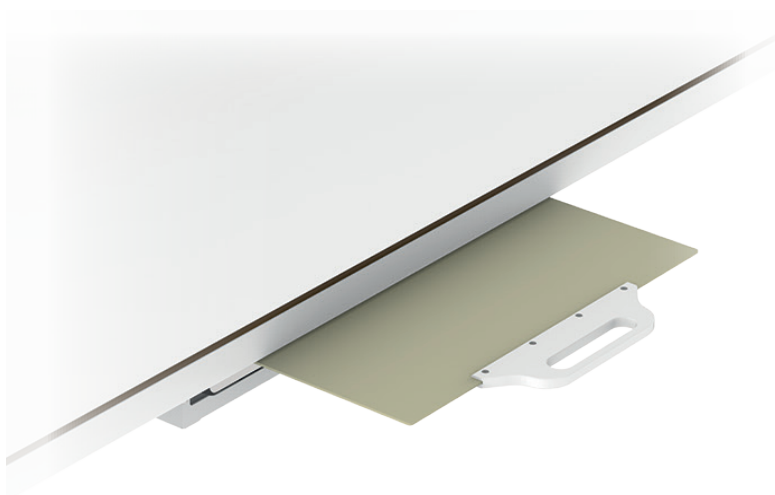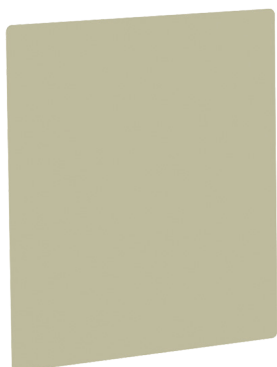


Placa DR com software DRGEM totalmente integrada ao raio-x:



De parede



De chão

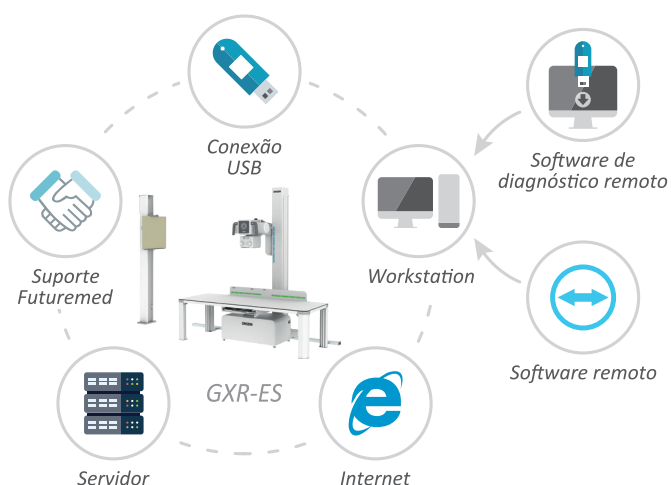

Especificações

Modelo	GXR-ES E40
Gerador	40kW
Monofásico	200-240V~ ±10%, 50/60Hz
mA Range	500mA
mAs Range	0.1 ~ 320mAs

Economize tempo e custos com a calibração automática e o diagnóstico remoto.



Santa Catarina

Av. Marechal Castelo Branco, 65
Conjunto 904 B
Bairro Campinas
São José - SC
CEP 88.101-020
Tel: +55 (48) 3380-9172

São Paulo

Rua Cayowaá, 759
Conjunto 12
Bairro Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05.018-001
Tel: +55 (11) 2387-4760